

行政院環境保護署公告

中華民國 108 年 5 月 10 日

環署授檢字第 1080002723 號

主 旨：預告訂定「水中油脂檢測方法－固相萃取重量法（NIEA W507.51C）」草案。

依 據：行政程序法第 154 條第 1 項。

公告事項：

一、訂定機關：行政院環境保護署。

二、訂定依據：水污染防治法第 68 條。

三、草案如附件。本案另詳載於本署環境檢驗所網站（<https://www.epa.gov.tw/niea/C79C6CF22A0FE69D>）「草案預告」網頁及公共政策網路參與平台之眾開講（<https://join.gov.tw/policies/>）。

四、對於本草案內容有任何意見或修正建議者，請於本預告刊登公報之次日起 60 日內陳述意見或洽詢：

(一) 承辦單位：行政院環境保護署環境檢驗所

(二) 地址：桃園市中壢區民族路 3 段 260 號

(三) 電話：(03)4915818 分機 2117

(四) 傳真號碼：(03)4910419

(五) 電子郵件：tjlin@epa.gov.tw

署 長 張子敬

水中油脂檢測方法－固相萃取重量法（NIEA W507.51C）草案總說明

為執行水中油脂之檢測，參考美國公共衛生協會「水與廢水檢驗標準方法」(American Public Health Association, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., Method 5520)、美國環境保護署「油脂檢測方法－萃取重量法」(U.S. EPA. n-Hexane extractable material (HEM; oil and grease) and silica gel treated n-hexane extractable material (SGT-HEM; non-polar material) by extraction and gravimetry. Method 1664, Revision B)及行政院環境保護署「水中油脂檢測方法－索氏萃取重量法（NIEA W505.53B）」與「水中油脂檢測方法－液相萃取重量法（NIEA W506.22B）」，爰依水污染防治法第六十八條，整併現行檢測相關規定，擬具「水中油脂檢測方法－固相萃取重量法（NIEA W507.51C）」草案，其要點如下：

- 一、依據土壤處理標準管制之水質項目，規範礦物類油脂及動植物性油脂之相關內容。
- 二、品質管制訂定查核樣品分析相關規範，並明訂空白樣品分析之管制限值。
- 三、計算公式、方法部分文字敘述及格式。
- 四、度量衡單位區間依「法定度量衡單位」表示。

水中油脂檢測方法—固相萃取重量法（NIEA W507.51C）草案

公 告	說明
主旨：公告「水中油脂檢測方法—固相萃取重量法（NIEA W507.51C）」，並自中華民國一百零九年一月十五日生效。	方法名稱及生效日期。
依據：水污染防治法第六十八條。	法源依據。
公告事項：方法內容詳如附件。	方法內容。

水中油脂檢測方法—固相萃取重量法草案

NIEA W507.51C

一、方法概要

水中油脂經固相萃取膜吸附並以正己烷沖提後，將經無水硫酸鈉除水之沖提液收集至燒瓶中，蒸餾後將餘留物稱重，即得總油脂量；將總油脂溶於正己烷，以活性矽膠吸附極性物質，過濾蒸餾並烘乾稱重，即得礦物類油脂量；總油脂量與礦物類油脂量之差，即為動植物性油脂量。

二、適用範圍

本方法適用於地面水體、地下水體、廢（污）水、放流水及飲用水中油脂之檢測。在以液相萃取法萃取時會發生嚴重乳化之樣品，可選擇使用本方法進行檢測。

本方法為效能基準（Performance-based）導向的分析方法，分析人員可依所使用固相萃取裝置的不同，適當調整正己烷沖提及回收方式，惟修改後之方法，應符合品質管制之規範。

三、干擾

- （一）任何可被萃取膜萃取且可溶解於正己烷溶劑中之元素硫、複雜的芳香族化合物、含氯、硫和氮之碳氫化合物以及某些有機染料可能會一併被萃取出而被誤判為油脂。
- （二）樣品須均勻通過固相萃取膜，否則會降低油脂之回收率。
- （三）低沸點（小於 85°C）之油脂類物質在蒸餾及烘乾過程中易漏失，以致樣品中油脂量之測值將較實際值為低。
- （四）重油中的殘留物可能含有相當多無法萃取之物質。
- （五）當正己烷沖提液流經乾燥管，若含水量超過無水硫酸鈉之去水能力，無水硫酸鈉會溶解而流入燒瓶中，於蒸餾烘乾後，將於燒瓶中析出，而造成正干擾。此時，於燒瓶加入 30 mL 正己烷再次溶解油脂，以經正己烷潤濕之濾紙過濾並收集濾液，再淋洗燒瓶

兩次，洗液一併收集至濾液中，繼續依七、步驟（一）12 至 14 完成蒸餾及烘乾稱重。（註1）

（六）於檢測礦物類油脂時，若矽膠粉末穿過濾紙將會形成正干擾，此時須使用較細孔徑之濾紙。

（七）重量法易受環境濕度之影響而使稱重結果產生誤差，故從乾燥器中取出稱重時，動作宜迅速，避免在空氣中曝露太長時間。

四、設備與材料

（一）固相萃取裝置：儲液器（Reservoir）、固相萃取膜固定座及沖提液收集容器組成之裝置，包含手動、半自動或全自動設備。

（二）油脂固相萃取膜：90 mm 或其他規格。（註2）

（三）燒瓶：125 mL。

（四）水浴：能控制溫度於 $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

（五）真空抽氣機或其他抽氣設備。

（六）蒸餾回收裝置：如圖一所示，亦可使用減壓濃縮機或其他溶劑回收裝置。

（七）冰水浴。

（八）乾燥器。

（九）烘箱。

（十）磁石攪拌器。

（十一）磁石：以鐵氟龍（Teflon）塗覆。

（十二）分析天平：可精稱至 0.1 mg。

（十三）乾燥管：可裝約 10 g 無水硫酸鈉。

五、試劑

（一）試劑水：不含有干擾物質之蒸餾水或去離子水。

- (二) 1 + 1 鹽酸：將 1 體積之濃鹽酸緩緩加入 1 體積之試劑水中。
- (三) 1 + 1 硫酸：將 1 體積之濃硫酸緩緩加入 1 體積之試劑水中。
- (四) 正己烷：殘量級。
- (五) 無水硫酸鈉 (Na_2SO_4)：分析級。
- (六) 矽膠 (Silica gel)：100 mesh 至 200 mesh， $110^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ 乾燥 24 小時後，置於乾燥器或密封容器內備用。
- (七) 十六烷 (Hexadecane)：純度 98% 以上。
- (八) 硬脂酸 (Stearic acid)：純度 98% 以上。
- (九) 十六烷 / 硬脂酸標準溶液 (1 + 1)，製備於丙酮中，十六烷及硬脂酸濃度皆為 2000 mg/L，可依下列方式製備或購買市售標準溶液。
 - 1. 稱取 $200 \text{ mg} \pm 2 \text{ mg}$ 硬脂酸及 $200 \text{ mg} \pm 2 \text{ mg}$ 十六烷於 100 mL 定量瓶，以丙酮定容至標線 (註 3)。
 - 2. 溶解硬脂酸及十六烷，且溶液在室溫冷卻至體積回復標線後，將溶液轉移至 100 mL 至 150 mL 具鐵氟龍裡襯且附螺旋蓋之瓶中，旋緊瓶蓋，於瓶上標示液面位置，室溫下貯存於暗處 (註 4)。
 - 3. 使用前，確認瓶上液面標示，若有需要，以丙酮補充體積至標示處。加熱再溶解所有可見之沈澱物，惟在使用前，須將溶液在室溫冷卻至體積回復標線。
 - 4. 溶液最長保存期限為 6 個月，若有變質或蒸發現象時應重新配製 (註 5)。
- (十) 精密度與回收率標準品 (Precision and recovery standard)：移取 $10 \text{ mL} \pm 0.1 \text{ mL}$ 十六烷 / 硬脂酸標準溶液至 950 mL 至 1050 mL 試劑水中，十六烷及硬脂酸之濃度皆約 20 mg/L。

六、採樣與保存

- (一) 以廣口玻璃瓶採集具代表性水樣，採樣前廣口玻璃瓶先以清潔劑

清潔，於清水洗淨後再以正己烷淋洗，以去除干擾物質。

- (二) 採樣時，水樣不得溢出樣品瓶且不得分裝樣品。檢驗時需全量分析。
- (三) 水樣取樣量一般約為 1 L，若預期樣品濃度大於 1000 mg/L，按比例減少取樣量。
- (四) 若水樣於採樣後 2 小時內無法分析，以 1+1 鹽酸或 1+1 硫酸酸化水樣至 pH 值小於 2，並於 $4^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 冷藏，於此條件下，可保存 28 天。

七、步驟

(一) 總油脂

1. 首先於樣品瓶上標示水樣之位置，以便事後測量水樣體積（註 6）；若採樣時未加酸保存則以 1+1 鹽酸或 1+1 硫酸酸化水樣至 pH 值小於 2（一般而言，每 1 L 水樣加 5 mL 即足夠）。
2. 組合固相萃取裝置，並依據廠商之使用手冊調理（Condition）固相萃取膜（註 7），在倒入樣品萃取前，應保持萃取膜溼潤。
3. 將樣品倒入儲液器，若樣品含大量懸浮固體或底泥，可能會阻塞萃取膜時，將樣品靜置待固體物沈澱後，將上澄液倒入儲液器中。
4. 打開真空抽氣機，以 100 mL/min 速率（註 8）進行抽氣，在萃取膜快乾前，倒入含有沉澱物之剩餘樣品。
5. 樣品萃取完成後，以真空抽氣機抽氣 10 分鐘，儘可能去除萃取膜殘留水分（註 9），然後更換收集容器。
6. 取 1 份正己烷淋洗樣品瓶後倒入儲液器，過程中要確認淋洗儲液器壁。
7. 施加些微真空，吸取數滴正己烷通過萃取膜後解除真空，使溶劑浸泡萃取膜 2 分鐘。
8. 施加足夠真空沖提並收集沖提液。（註 10）

9. 萃取膜抽乾後，取第 2 份正己烷重複沖提程序，並合併沖提液。
10. 將沖提液流經乾燥管，收集於燒瓶。
 - (1) 乾燥管內裝有約 10 g 無水硫酸鈉，並先以正己烷潤濕。
 - (2) 燒瓶使用前，須先放入 $90^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 之烘箱中烘約 10 分鐘，取出放入乾燥器中冷卻後稱重並記錄之（至 0.1 mg）；重複前述烘乾、冷卻及稱重步驟，直至前後 2 次重量差小於 0.5 mg，此為空瓶重。
11. 以正己烷淋洗收集容器，移入乾燥管中一併收集於燒瓶內。
12. 燒瓶內之正己烷，在 $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 水浴上蒸餾（正己烷可回收使用）並乾燥之。（註 11）
13. 為避免燒瓶內仍殘存有正己烷或水氣，於蒸餾後，放入 $85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 之烘箱內 10 分鐘。
14. 取出燒瓶，放入乾燥器中冷卻後稱重並記錄之（至 0.1 mg）；重複前述烘乾、冷卻及稱重步驟，直至前後 2 次重量差小於 0.5 mg。（保留燒瓶及內容物以測定礦物類油脂）。

（二）礦物類油脂

1. 加入 100 mL 正己烷於檢驗總油脂之燒瓶，以溶解油脂，或將水樣依七、步驟（一）1 至 11 操作。
2. 於燒瓶中每 100 mL 溶劑或每 100 mg 總油脂中加入 3.0 g 矽膠（最多加入 30.0 g 矽膠（1000 mg 總油脂）），加栓後以磁石攪拌器攪拌 5 分鐘。
3. 以先用溶劑潤濕之濾紙過濾，收集濾液於已稱重之燒瓶內，再以 10 mL 正己烷洗滌濾紙及燒瓶，洗液併於燒瓶內。
4. 依七、步驟（一）12 至 14 操作。

（三）動植物性油脂

七、步驟（一）項之總油脂量減去七、步驟（二）項之礦物類油脂量即為動植物性油脂量。

八、結果處理

$$(一) \text{總油脂量 (mg/L)} = \frac{A \times 10^6}{V}$$

A：檢驗總油脂燒瓶增加之重量 (g)

V：水樣體積 (mL)

$$(二) \text{礦物類油脂量 (mg/L)} = \frac{B \times 10^6}{V}$$

B：檢驗礦物類油脂燒瓶增加之重量 (g)

V：水樣體積 (mL)

$$(三) \text{動植物性油脂量 (mg/L)} = C - D$$

C：總油脂量 (mg/L)

D：礦物類油脂量 (mg/L)

九、品質管制

(一) 查核樣品分析：每批次或每 10 個樣品至少執行 1 次精密度與回收率標準品分析，總油脂回收率應介於 78% 至 114%，礦物類油脂回收率應介於 64% 至 132%。

(二) 空白樣品分析：每批次樣品或每 10 個樣品至少執行 1 次空白樣品分析，空白分析值應小於法規管制標準值的 5%。

十、精密度與準確度

(一) 單一實驗室以自動及手動固相萃取系統，分析 46 個以十六烷及硬脂酸配製濃度約 20 mg/L 之查核樣品，回收率分別為 87.1% ± 7.8% 及 92.5% ± 4.4%。

(二) 廢水樣品之精密度可能因基質不同而改變，單一實驗室進行 8 種家庭廢水（濃度範圍 18 至 60 mg/L）重複分析（n=4-6），平均變異係數（CV）為 9.0%；另一實驗室進行 16 種不同基質之廢水樣品（濃度範圍 4 至 3000 mg/L）重複分析（n=4），變異係數範

圍為 1.1 至 57.1%；四家實驗室之合併結果（Pooled results）顯示平均變異係數為 $17.0 \pm 13.8\%$ 。

- （三）單一實驗室基質添加分析之管制圖，平均相對差異百分比為 2.2%，平均回收率為 87.2%，標準偏差為 5.5%。

十一、參考資料

- （一）American Public Health Association, American Water Works Association & Water Pollution Control Federation, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd ed., Method 5520-oil and grease-A, B, F, G pp.5-41~5-48, 2017.
- （二）U.S. EPA. n-Hexane extractable material (HEM; oil and grease) and silica gel treated n-hexane extractable material (SGT-HEM; non-polar material) by extraction and gravimetry. Method 1664, Revision B, 2010.
- （三）行政院環境保護署，水中油脂檢測方法—液相萃取重量法 NIEA W506.22B，中華民國108年。

註1：為避免無水硫酸鈉於沖提液中析出之干擾，亦可使用市售溶劑相分離濾紙（Solvent phase separation paper）來取代無水硫酸鈉。

註2：更換不同直徑或廠牌之油脂固相萃取膜，須重新依據九、（一）步驟，進行起始精密度與回收率之測試。

註3：溶液可能需要加溫以完全溶解硬脂酸，若有加溫，溶液使用前須在室溫冷卻至體積回復標線，因劇烈震盪所產生的熱會增加溶液體積，而導致低回收率，溶液加溫後至少冷卻 1 個小時可獲致較佳結果。

註4：十六烷 / 硬脂酸標準溶液可以分成數等份分裝於已知容量之瓶中，但仍須於瓶上標示液面位置，室溫下貯存於暗處。

註5：以移液管取 10 mL 標準溶液於已知重量之稱盤中，置於排煙櫃中蒸發至乾，增加之重量應為 $40 \text{ mg} \pm 1 \text{ mg}$ ，否則需重新配製。使用大口徑平滑壁之鋁稱盤可獲致較佳結果。

註6：於樣品瓶中加入試劑水至水樣標線，再以量筒量測試劑水之體積，此即為水樣體積。

註7：調理為獲致均勻流動及良好回收率之重要程序。


註8：較快的萃取速率將會減少回收率。

註9：樣品萃取後，於沖提前要確保萃取膜完全乾燥；然而，使用丙酮淋洗幫助乾燥，將導致低回收率。

註10：在沖提期間，小心控制真空度，以使溶劑完全滲入萃取膜。

註11：除使用水浴蒸餾，亦可使用減壓濃縮機或其他方式回收正己烷，惟溫度不可超過 85°C。

註12：廢液分類處理原則一本檢驗產生之廢液依一般無機廢液處理原則處理，產生之廢溶劑依一般不含氯廢溶劑處理原則處理。

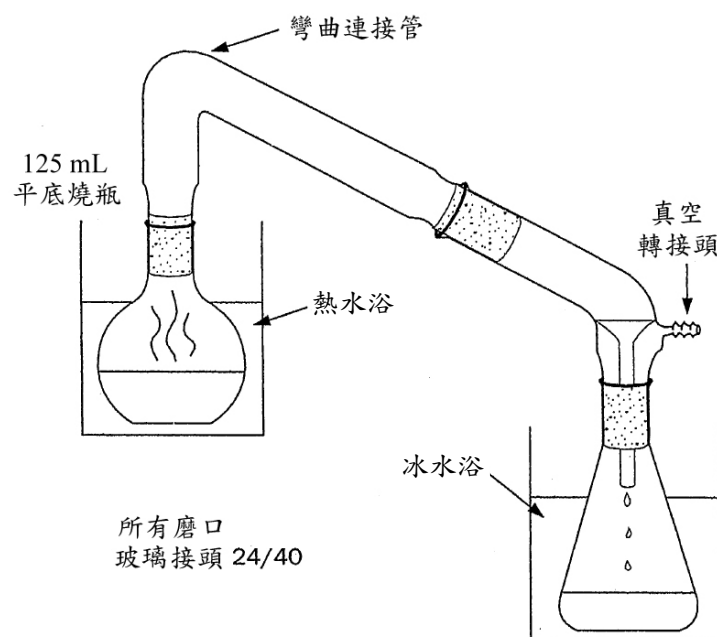

圖一 蒸餾回收裝置示意圖